

AQUA PULSE



DENTÁLNY IRIGÁTOR AQUA PULSE

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si vybrali produkt značky SOLAC.

Vďaka jeho technológii, dizajnu a funkčnosti a skutočnosti, že spĺňa najprísnejšie štandardy kvality, vám zaručujeme plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

Prečítajte si tieto pokyny pozorne pred zapnutím prístroja a uschovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu.

- Ústne irigátory môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí len pod dohľadom.
- Tento ústny irigátor smie byť používaný len so studenou alebo teplou vodou (do 40 °C).

- Deti si s prístrojom nesmú hrať.
- Tento prístroj je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné účely.

Tento prístroj má odnímateľný napájací zdroj (ZD006M050100EU).

- Prístroj smie byť používaný len s napájacím zdrojom dodaným s prístrojom.
- Prístroj obsahuje nevymeniteľné batérie. Po vyčerpaní batérie musí byť prístroj riadne zlikvidovaný.
- **UPOZORNENIE:** Na nabíjanie batérie používajte len odnímateľný napájací zdroj dodaný s týmto prístrojom.
- Uistite sa, že napätie uvedené na štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, než prístroj zapojíte.
- Vidlica prístroja musí do zásuvky správne pasovať. Nezasahujte do vidlice a nepoužívajte adaptér.
- Nepoužívajte prístroj, ak je odnímateľný napájací zdroj poškodený.
- Ak dôjde k poškodeniu krytu prístroja, okamžite prístroj odpojte zo siete, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa vidlice mokrými rukami.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie návodu k použitiu ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov odneste prístroj k autorizovanému servisu. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo opravovať sami, môže to byť nebezpečné.

PRE VERZIE PRODUKTU PRE EÚ A/LUBO NA POŽIADANIE VO VAŠEJ KRAJINE:


EKOLOGICKÉ ASPEKTY A RECYKLOVATEĽNOSŤ PRODUKTU

- Materiály obalu tohto prístroja sú súčasťou systému zberu, triedenia a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné kontajnery pre každý typ materiálu.
- Produkt neobsahuje látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.

- Tento symbol znamená, že ak chcete prístroj po ukončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi elektroodpadu (WEEE).
- Tento prístroj je v súlade s:
 - Smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí
 - Smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite
 - Smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení použitia určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
 - Smernicou 2009/125/EC o požiadavkách na ekodizajn energeticky súvisiacich produktov
- Nasledujúce informácie sa týkajú nariadenia 2019/1782 o ekodizajne.


Požiadavky na externé napájacie zdroje

Parameter	Hodnota
Značka a adresa	Solac Small Electro, S.L., Avda. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Španielsko)
Model	ZD006M050100EU
Vstupné napätie	100–240 V
Vstupná AC frekvencia	50/60 Hz
Výstupné napätie	5,0 V
Výstupný prúd	1,0 A
Výstupný výkon	5,0 W
Priemerná účinnosť	74,00 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	N/A
Spotreba energie bez zaťaženia	0,09 W

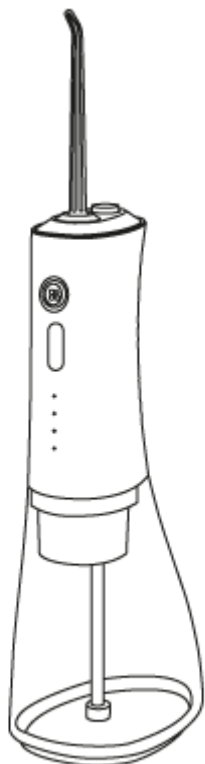

AQUA PULSE

solac

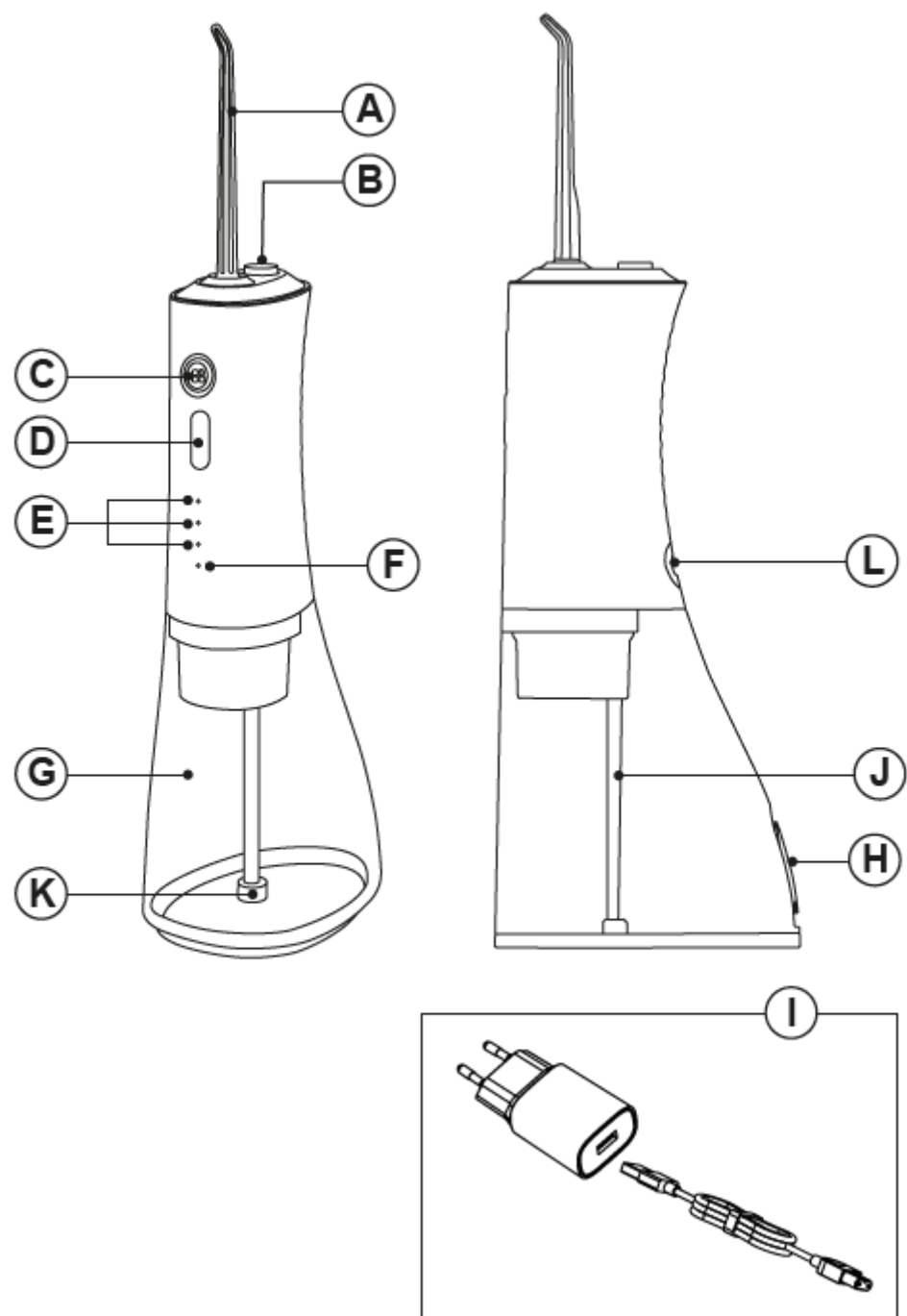

ZUBNÝ IRIGÁTOR

AQUA PULSE

POPIS

- A – Tryska
- B – Tlačidlo na uvoľnenie trysky
- C – Tlačidlo ON/OFF
- D – Tlačidlo režimu
- E – Kontrolky režimu
- F – Kontrolka batérie
- G – Odnímateľná nádržka na vodu
- H – Viečko nádržky na vodu
- I – Nabíjačka
- J – Sacia hadica
- K – Filter
- L – Nabíjacia zásuvka

Ak váš model prístroja nemá vyššie uvedené príslušenstvo, je možné ho zakúpiť samostatne v Service technickej podpory.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Nepoužívajte prístroj, ak nie sú časti alebo príslušenstvo správne nasadené.
- Nepoužívajte prístroj, ak je niektoré príslušenstvo alebo spotrebný materiál poškodený. Ihneď ho vymeňte.
- Neprepínajte prístroj bez vody.
- Nepoužívajte prístroj, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje.
- Nepoužívajte prístroj, ak je prevrátený, a neprevracajte ho počas prevádzky.
- Dodržujte indikátor MAX hladiny vody.
- Ak prístroj používate v kúpeľni alebo podobnom prostredí, vždy ho po použití odpojte zo siete, aj keď len na krátky čas, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je prístroj odpojený.
- Odpojte prístroj zo siete, keď ho nepoužívate, a pred čistením, výmenou príslušenstva alebo nastavovaním.
- Odpojte prístroj zo siete pred doplnením nádržky na vodu.
- Uchovávajte prístroj na suchom, bezprašnom mieste mimo priameho slnečného svetla.

- Udržiavajte prístroj v dobrom stave. Kontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zablokované a či nie sú poškodené časti, ktoré by mohli ovplyvniť jeho správnu funkciu.
- Používajte prístroj a jeho príslušenstvo podľa týchto pokynov a s ohľadom na pracovné podmienky a zamýšľané použitie. Používanie prístroja na iné účely môže byť nebezpečné.
- Nikdy neotvárajte batérie.
- Nikdy nenechávajte prístroj pripojený k sieti bez dozoru. Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť prístroja.
- Nikdy nepokladajte prístroj na povrch počas jeho používania.
- Prístroj má časovač 2 minúty, ktorý sa automaticky vypne po 2 minútach nepretržitého použitia. Ak potrebujete pokračovať, jednoducho opäť stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Pri plnom naplnení nádržky (320 ml) sa doba prevádzky líši podľa zvoleného režimu čistenia.
- Nepoužívajte prístroj so zvieratami.
- Batériu nabíjajte iba nabíjačkou dodanou výrobcom. Použitie inej nabíjačky môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Používajte prístroj iba s batériami, pre ktoré je určený. Použitie iných batérií môže byť nebezpečné.

NABÍJANIE BATÉRIE

Pozor: Nová batéria nie je plne nabitá a pred prvým použitím ju je nutné nabiť.

- Nabíjajte batériu pri teplote 0–45 °C.
- Uistite sa, že prístroj aj ruky sú suché.
- Pripojte nabíjačku do nabíjacej zásuvky prístroja a do siete.
- Rozsvieti sa kontrolka, ktorá signalizuje začiatok nabíjania.
- Plné nabitie batérie trvá približne 6 hodín. Nepokúšajte sa batériu prebíjať.
- Pripojte nabíjací kábel do zásuvky na zadnej strane prístroja.
- Kontrolka sa rozsvieti a bliká – batéria sa nabíja.
- Po uplynutí doby odpojte kábel a nabíjačku.

- Prístroj nie je možné používať počas nabíjania.
-

KONTROLA STAVU BATÉRIE

- Ak kontrolka bliká, batéria je takmer vybitá.
 - Pri pripojení k sieti kontrolka bliká oranžovo, ak je batéria pod 20 %, alebo zeleno, ak je medzi 20–100 %.
 - Po úplnom nabití sa kontrolka rozsvieti na 30 sekúnd a potom zhasne.
 - Počas použitia svieti kontrolka modro pri 5–100 % alebo oranžovo bliká, ak je batéria pod 5 %.
 - Pri vybití na 0 % kontrolka rýchlo bliká oranžovo.
 - Pre dlhšiu životnosť batérie je vhodné ju nabíjať až po úplnom vybití.
-

POUŽITIE PRÍSTROJA

Pred použitím:

- Odstráňte všetky obaly.
- Starostlivo si prečítajte príručku „Bezpečnostné upozornenia“.
- Pred prvým použitím plne nabijte batériu.

Plnenie vodou:

- Nádržku naplňte pred zapnutím prístroja.
- Prístroj držte vodorovne.
- Otvorte viečko a naplňte nádržku vodou, dodržujte MAX úroveň.
- Zavrite viečko.
- Odporúča sa používať teplú vodu pod 40 °C alebo tečúcu vodu z kohútika.
- Prístroj je určený iba na vodu, nepoužívajte iné tekutiny.

Nasadenie trysky:

- Prístroj používa vymeniteľnú trysku.
- Trysku jednoducho zatlačte do úchytu.
- Pre vybratie stlačte tlačidlo uvoľnenia trysky a vytiahnite ju.
- Nepoužívajte tlačidlo uvoľnenia počas prevádzky.

Použitie:

- Prístroj nepripájajte k sieti.
- Držte prístroj zvislo, nakloňte sa nad drez a vložte trysku do úst.
- Nasmerujte prúd vody požadovaným smerom.
- Zapnite prístroj krátkym stlačením tlačidla ON/OFF.
- Rozsvieti sa kontrolka.
- Zvoľte požadovaný režim.
- Prístroj sa automaticky vypne po 2 minútach, ale môžete ho vypnúť kedykoľvek ručne.

Po použití:

- Vypnite prístroj tlačidlom ON/OFF.
- Vypustite zvyšky vody z prístroja.
- Prístroj vyčistite.

ČISTENIE

- Prístroj odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
- Čistite vlhkým handričkou s kvapkou umývacieho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne chemikálie ani abrazívne prostriedky.

VÝMENA BATÉRIÍ

- Batérie môžu byť vymenené iba odborníkom.
- V prípade potreby odneste prístroj do autorizovaného servisu.
- Nepokúšajte sa prístroj rozoberať sami, je to nebezpečné.